

Guía rápida de uso

Rutina diaria



Rellene el cuestionario diario si así se le indica



Lleve puesto el sensor



Recopile los datos



Sincronice y cargue el sensor


Cómo configurar el sensor y el iPad

CONFIGURAR SENSOR

- 1 Desinfecte los sensores y el cargador inalámbrico.




Sensores

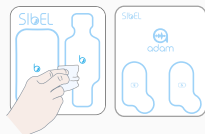

Cargador inalámbrico



- 2 Coloque los sensores sobre el cargador para que se activen.

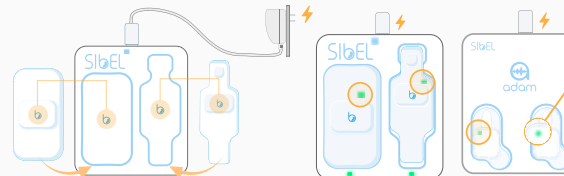

Al situarse sobre el cargador, el sensor debería emitir una luz verde


- Luz parpadeante
El sensor está cargando.
- Luz fija
El sensor está completamente cargado.

CONFIGURAR IPAD

- 1 Asegúrese de que el iPad esté cargado y conectado a Internet.




- 2 Acerque los sensores al iPad para vincularlos (Tienen que estar a menos de 2 metros).

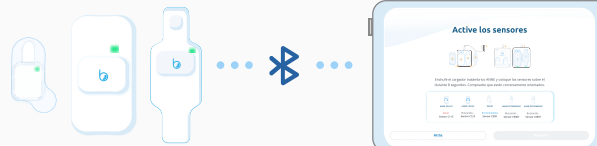



Guía rápida de uso de la aplicación

Manual de la aplicación

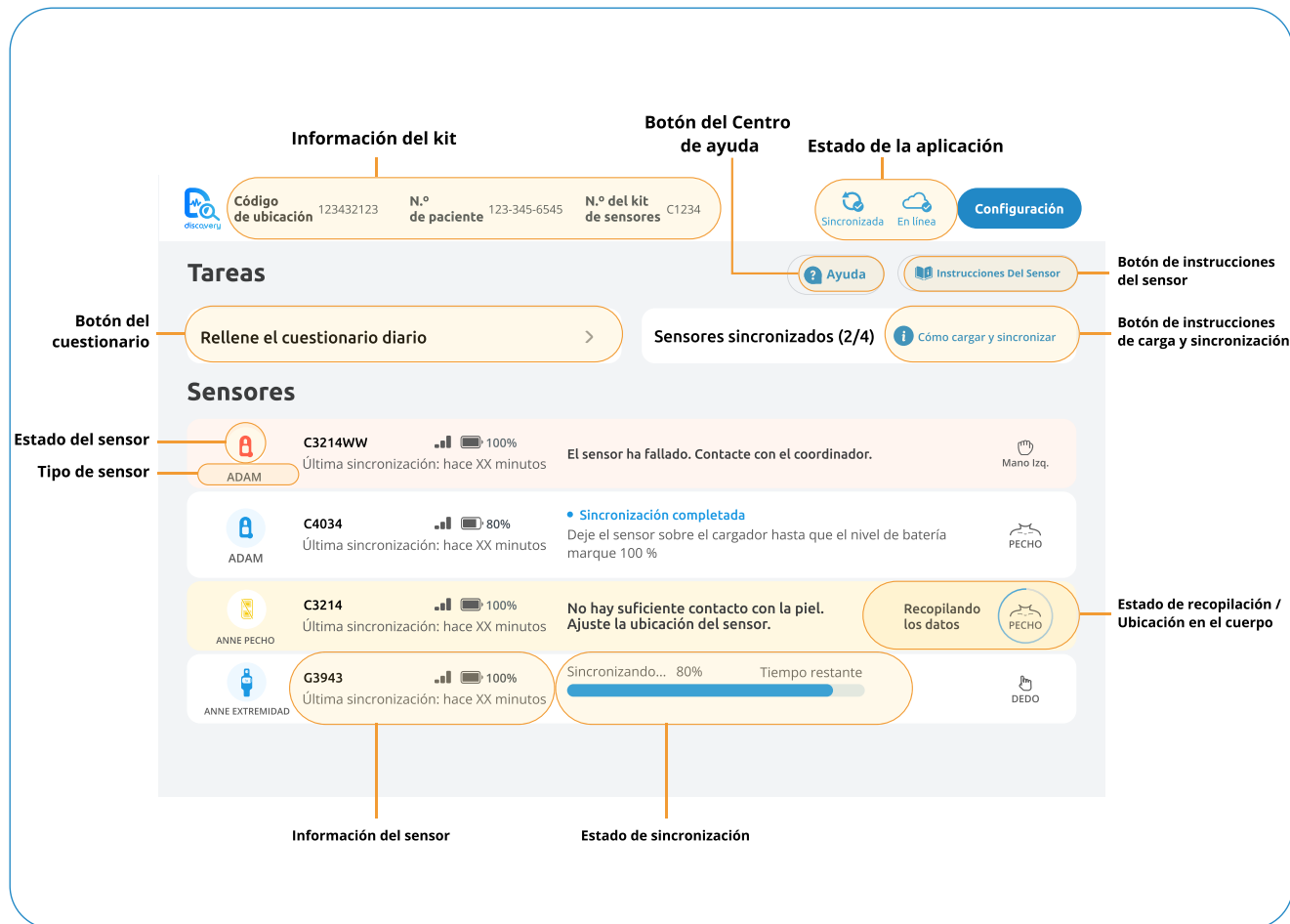

! Solución de problemas



Fuera de línea

Compruebe su conexión a Internet.



No sincronizado

Compruebe su conexión a Internet.



No hay suficiente contacto con la piel

Ajuste la ubicación o sustituya el adhesivo.



Fallo del sensor

Contacte con el coordinador del estudio.



Sensor fuera de alcance

Aproxime la tableta al sensor. El sensor se conectará automáticamente una vez que se detecte la señal.



Batería baja

Cargue el sensor lo antes posible. El sensor se desconectará automáticamente cuando se quede sin batería.