

Guía de inicio rápido

Rutina diaria



Rellene el cuestionario diario si es necesario



Use el sensor



Recopile los datos




Sincronice y cargue el sensor


Cómo configurar el sensor y el iPad

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR

1 Desinfecte los sensores y el cargador inalámbrico.

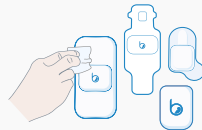


Sensores

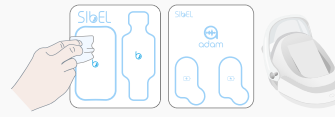

Cargador inalámbrico

2 Coloque los sensores en el cargador para activarlos.

Anne, Anne Limb, Adam

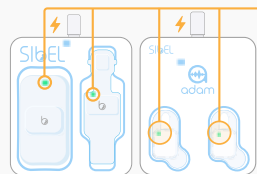

⌚ ~5 horas

- **LED verde fijo**
El sensor está completamente cargado.
- **LED rojo fijo**
Fallo del sensor.
- **LED azul intermitente**
El sensor no se conecta a la aplicación Discovery después de encenderlo. Datos disponibles para descargar y en el cargador.
- **LED verde intermitente**
El sensor se está cargando, pero no está completamente cargado.
- **LED rojo intermitente**
Sensor desconectado, batería baja o memoria insuficiente.

Se necesitan 5 horas para cargar completamente el sensor desde 0 %.

Aria




- **LED verde fijo**
El sensor está completamente cargado.
- **LED rojo fijo**
Fallo del cargador.
- **LED blanco fijo**
El cargador funciona y está listo para usar, pero el sensor no está en el cargador.
- **LED naranja fijo**
El sensor se está cargando, pero no está completamente cargado.
- **LED apagado**
El cargador no está enchufado.

CONFIGURACIÓN DEL IPAD

1 Asegúrese de que el iPad esté cargado y conectado a Internet.



2 Acerque los sensores al iPad para emparejarlos. (Deben estar a menos de 2 metros de distancia entre sí).

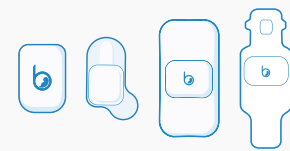



Guía de inicio rápido de la aplicación

Manual de la aplicación

! Solución de problemas

Botón del Centro de ayuda **Botón para desactivar el sensor**

Botón de cuestionario **Información del kit** **Botón de instrucciones del sensor** **Estado de la sincronización/conexión**

Identificación del centro: C1234 Identificación del sujeto: 12345678 Identificación del kit de sensores: 123-2345-3423 Sincronizado En línea Opción de administrador

Tareas

¿ Ayuda Instrucciones Del Sensor Apagar El Sensor Sustituir El Sensor

Llenar el cuestionario diario > Sincronizar sensores (2/5) Cómo cargar y sincronizar

Estado del sensor

Sensors

Tipo de sensor

Botón de sustitución del sensor

Botón de instrucciones de carga y sincronización

Estado de recopilación / Ubicación en el cuerpo

Información del sensor **Estado de sincronización**

Estado del sensor	Tipo de sensor	Información del sensor	Estado de sincronización
Anne	C32145	Última sincronización: hace 2 minutos	Error del sensor. Comuníquese con su coordinador.
Adam	A12345	Última sincronización: hace 1 minuto	Mal contacto con la piel. Ajuste la ubicación del sensor.
Anne Limb	L13523	Última sincronización: hace 3 minutos	Batería baja. Coloque el sensor en el cargador.
Sensor 1	C32345	Última sincronización: hace 4 minutos	Fuera de cobertura. Acerque el sensor.
Aria	S12345	Última sincronización: hace 1 minuto	Sincronización completada Deje el sensor en el cargador hasta que el nivel de la batería sea del 100 %.

Sin conexión
Verifique la conexión a Internet.

Sin sincronizar
Verifique la conexión a Internet.

Mal contacto con la piel
Ajuste la ubicación o sustituya el adhesivo.

FALLO DEL SENSOR
Póngase en contacto con el coordinador del estudio

Sensor fuera de alcance
Acerque la tableta al sensor. El sensor se volverá a conectar automáticamente al detectar la señal.

Batería baja
Cargue el sensor lo antes posible. El sensor se desconectará automáticamente cuando se agote la batería.