



Kurzanleitung

Tägliche Routine



Füllen Sie falls erforderlich bitte den täglichen Fragebogen aus



Tragen Sie den Sensor



Zeichnen Sie die Daten auf



Synchronisieren und laden Sie den Sensor


Einrichten von Sensor und iPad

SENSOR EINRICHTEN

- 1 Bitte desinfizieren Sie die Sensoren und das kabellose Ladegerät.




Sensoren

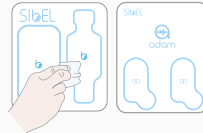

Kabelloses Ladegerät



- 2 Legen Sie die Sensoren zum Aktivieren auf das Ladegerät.

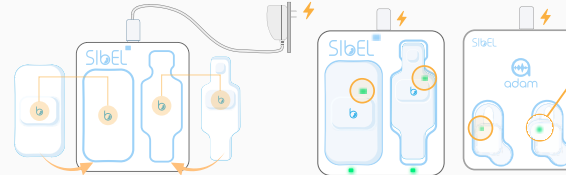

Es sollte eine grüne LED leuchten, wenn der Sensor auf dem Ladegerät liegt.


- Blinkende LED
Der Sensor lädt, ist jedoch noch nicht vollständig aufgeladen.
- Dauerhaft leuchtende LED
Der Sensor ist vollständig aufgeladen.

IPAD EINRICHTEN

- 1 Vergewissern Sie sich bitte, dass das iPad aufgeladen und mit dem Internet verbunden ist.




- 2 Platzieren Sie die Sensoren zum Koppeln bitte in der Nähe des iPads (Der Abstand zueinander darf maximal 2 Meter betragen).

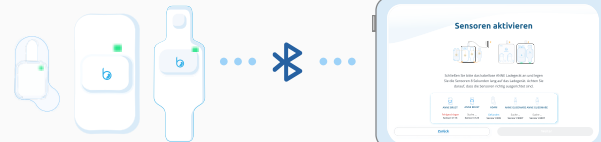

Kurzanleitungs-App

App-Handbuch

! Fehlersuche

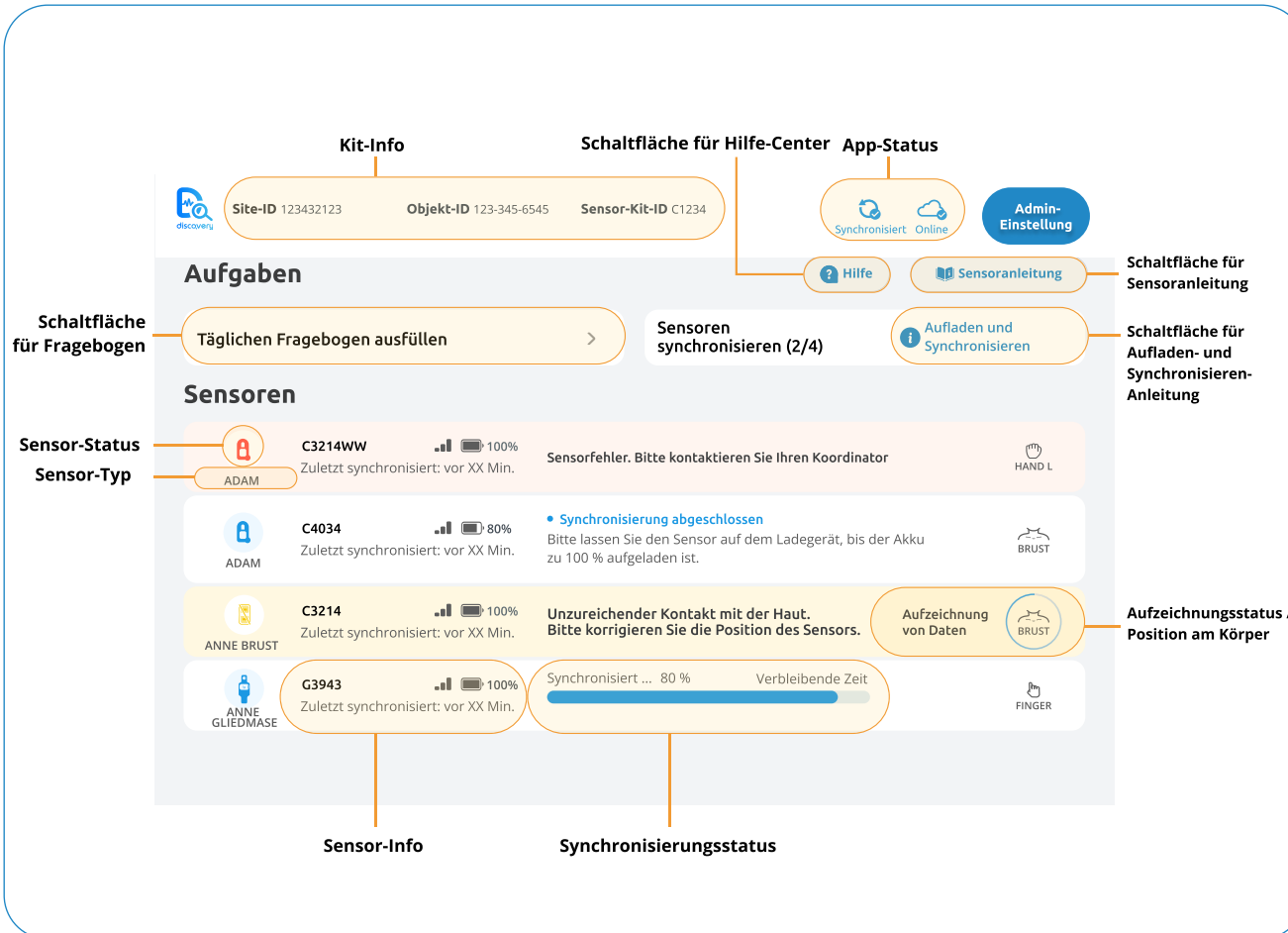

Offline

Bitte die Internetverbindung prüfen.



Nicht synchronisiert

Bitte die Internetverbindung prüfen.



Unzureichender Kontakt mit der Haut

Bitte ändern Sie die Position oder erneuern Sie die Klebefolie.



Sensorfehler

Bitte Studienkoordinator kontaktieren.



Sensor außerhalb der Reichweite

Bewegen Sie das Tablet bitte näher an den Sensor. Der Sensor verbindet sich automatisch wieder, sobald das Signal empfangen wird.



Akku schwach

Den Sensor bitte so bald wie möglich aufladen. Der Sensor schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist.