

Guida rapida


Routine giornaliera



Compila il questionario giornaliero se necessario



Indossa il sensore

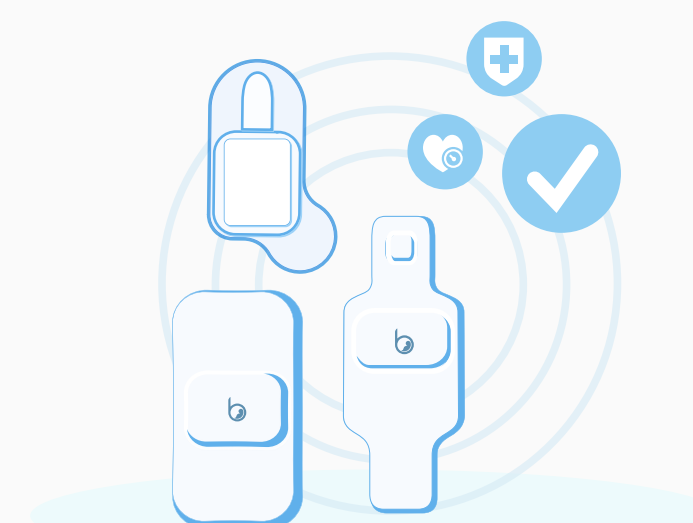

Raccogli i dati




Sincronizza e ricarica il sensore


Come configurare il sensore sull'iPad

CONFIGURAZIONE DEL SENSORE

- 1 Pulisci i sensori e il caricabatterie wireless con una soluzione disinfettante.

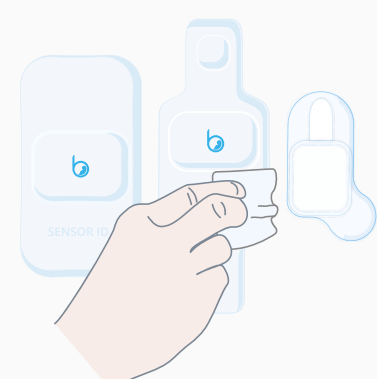


Sensori

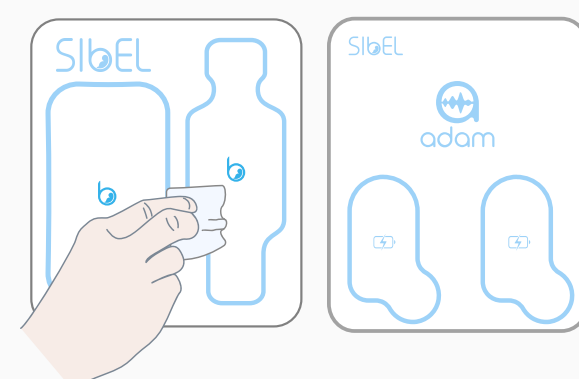

Caricabatterie wireless



- 2 Posiziona i sensori sul caricabatterie per riattivarli.

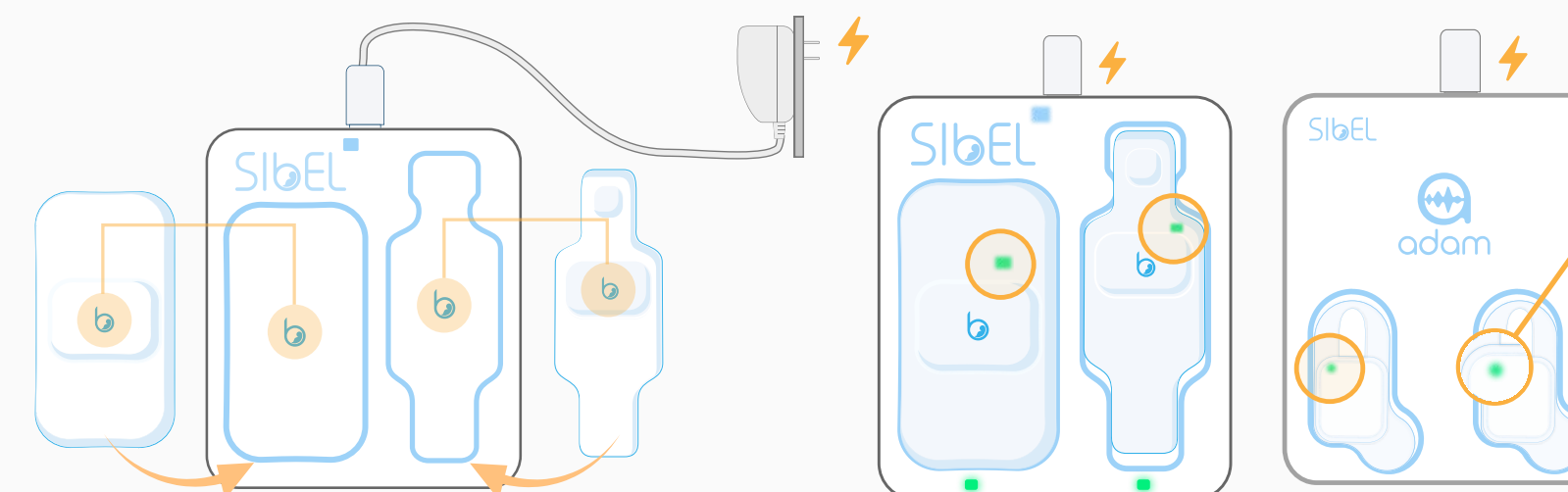


Quando è collegato al caricatore, il sensore mostra il LED verde.


- LED lampeggiante
Il sensore si sta caricando.
- LED fisso
Il sensore è completamente carico.

CONFIGURAZIONE IPAD

- 1 Assicurati che l'iPad sia carico e collegato a Internet.

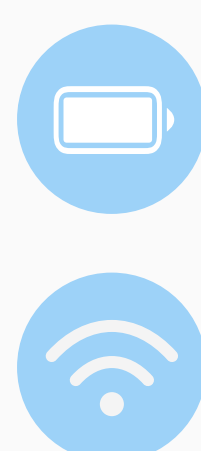


- 2 Avvicina i sensori all'iPad per associarli (devono trovarsi a meno di 2 metri l'uno dall'altro).

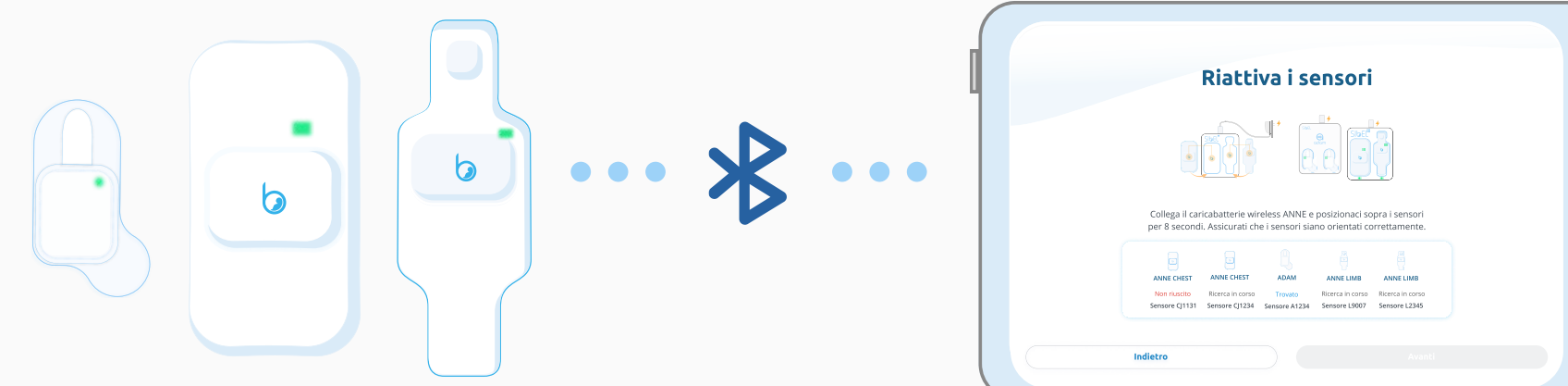

Guida rapida all'applicazione

Manuale dell'app

! Risoluzione dei problemi

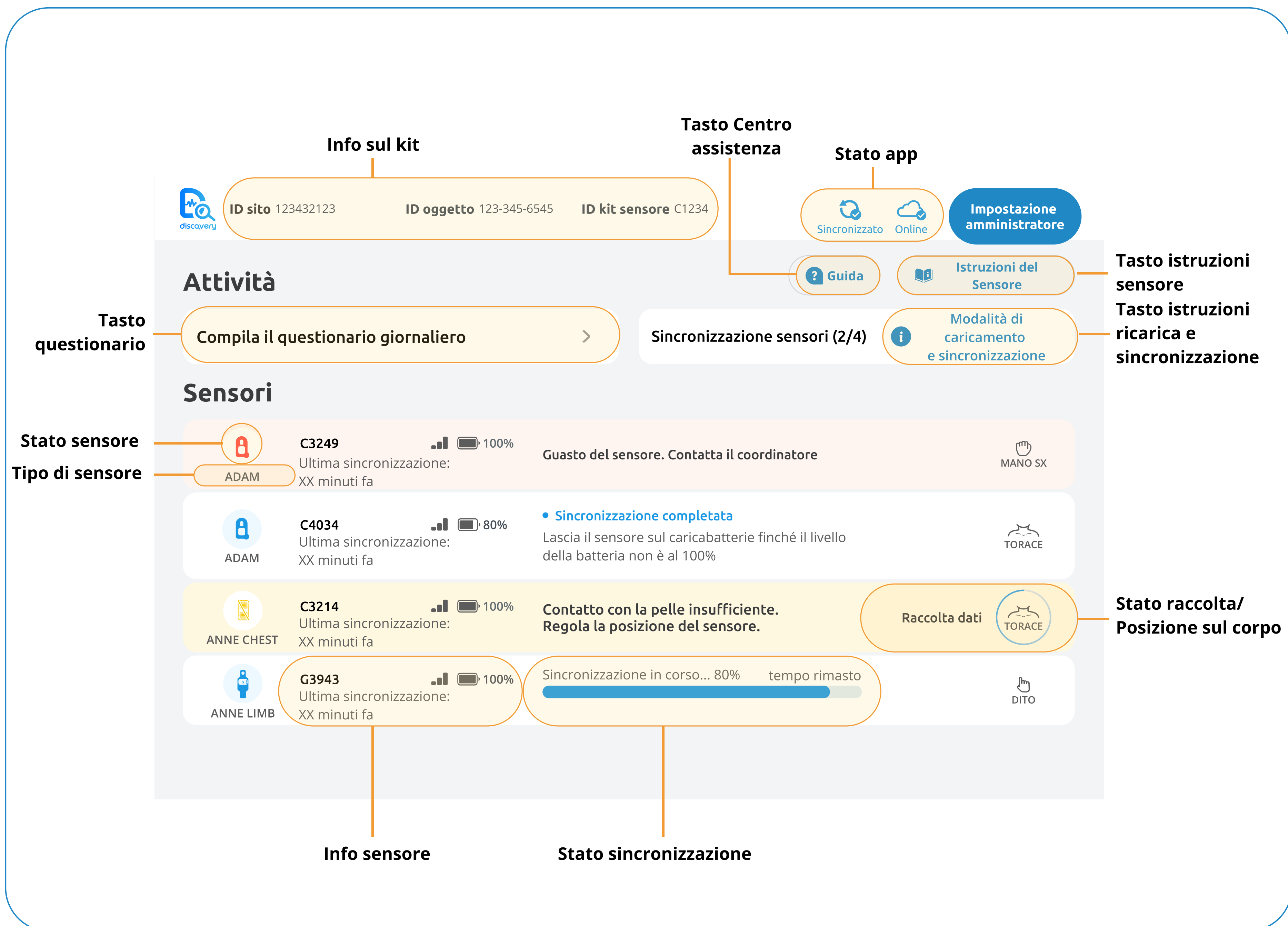

Offline

Controlla la connessione a Internet.



Non sincronizzato

Controlla la connessione a Internet.



Contatto con la pelle insufficiente

Regola la posizione o sostituisci l'adesivo.



Guasto Del Sensore

Contatta il coordinatore dello studio.



Sensore fuori portata

Avvicina il tablet al sensore. Il sensore si ricollega automaticamente dopo il rilevamento del segnale.



Batteria scarica

Carica il sensore il prima possibile. Il sensore si scollega automaticamente quando si esaurisce la batteria.