



Guide de démarrage rapide

Routine quotidienne



Remplir le questionnaire
quotidien si nécessaire



Porter le capteur



Recueillir les données



Synchroniser et charger
le capteur


Configuration du capteur et de l'iPad

CONFIGURATION DU CAPTEUR

- 1 Désinfecter les capteurs et le chargeur sans fil.




Capteurs

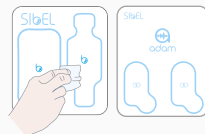

Chargeur sans fil



- 2 Placer les capteurs sur le chargeur pour les réveiller.

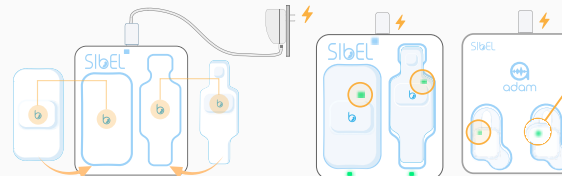

Le capteur doit afficher un voyant
vert lorsqu'il se trouve sur le chargeur


- Voyant clignotant
Le capteur est en cours de charge mais
n'est pas complètement chargé.
- Voyant fixe
Le capteur est complètement chargé.

CONFIGURATION DE L'IPAD

- 1 S'assurer que l'iPad est chargé
et connecté à Internet.



- 2 Rapprocher les capteurs de l'iPad pour jumeler les capteurs.
(Ils doivent être à 2 mètres maximum l'un de l'autre)

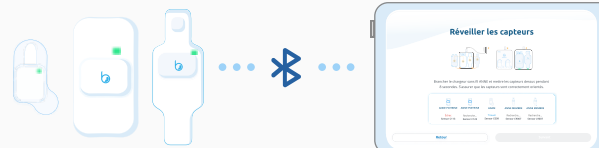



Guide de démarrage rapide de l'application

Manuel de l'application

! Résolution des problèmes

The screenshot shows the application interface with several sections and annotations:

- Informations sur le kit:** ID du centre 123432123, ID du patient 123-345-6545, ID du kit de capteur C1234.
- Bouton du centre d'aide:** Aide (question mark icon).
- Statut de l'application:** Synchronisé (refresh icon), En ligne (cloud icon), Réglage admin (gear icon).
- Tâches:** Remplir le questionnaire quotidien (arrow icon).
- Capteurs:** A list of sensors with their status and battery level.

Statut du capteur	Type de capteur	ID	Batterie	Statut	Message	Icon
ADAM	ADAM	C3214WW	100%	Échec du capteur.	Contactez votre coordinateur.	Main G
ADAM	ADAM	C4034	80%	Synchronisation terminée	Laissez le capteur sur le chargeur jusqu'à ce que le niveau de la batterie soit de 100 %	POITRINE
ANNE POITRINE	ANNE POITRINE	C3214	100%	Mauvais contact cutané.	Ajuster l'emplacement du capteur.	POITRINE
ANNE MEMBRE	ANNE MEMBRE	G3943	100%	Synchronisation... 80%	temps restant	DOIGT
- Annotations:**
 - Bouton du questionnaire:** Remplir le questionnaire quotidien.
 - Synchroniser les capteurs (2/4):** Synchroniser les capteurs (2/4).
 - Bouton d'instruction du capteur:** Instructions du capteur.
 - Bouton d'instruction de charge et de synchronisation:** Comment charger et synchroniser.
 - Recueil du statut / emplacement du corps:** Recueil des données.

Hors ligne
Vérifier la connexion Internet.

Non synchronisé
Vérifier la connexion Internet.

Mauvais contact cutané
Ajuster l'emplacement ou remplacer l'adhésif.

Échec du Capteur
Contacter le coordinateur de l'étude.

Capteur hors plage
Rapprocher la tablette du capteur. Le capteur se reconnectera automatiquement une fois le signal détecté.

Batterie faible
Charger le capteur dès que possible. Le capteur se déconnecte automatiquement lorsque la batterie est épuisée.