

Guide de démarrage rapide

Routine quotidienne



Remplir le questionnaire
quotidien si nécessaire



Porter le capteur



Collecter les
données




Synchroniser et charger
le capteur


Comment configurer le capteur et l'iPad

CONFIGU- RATION DU CAPTEUR

- 1 Désinfectez les capteurs
et le chargeur sans fil.

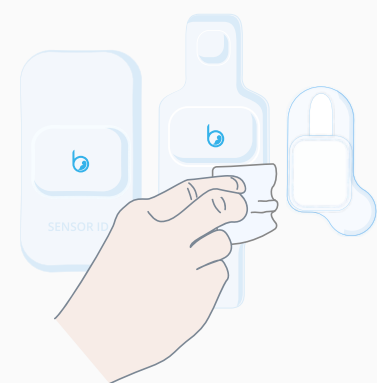


Capteurs

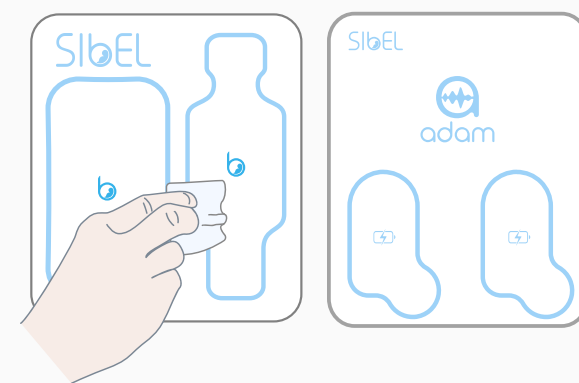

Chargeur sans fil



- 2 Placez les capteurs sur le chargeur pour les activer.


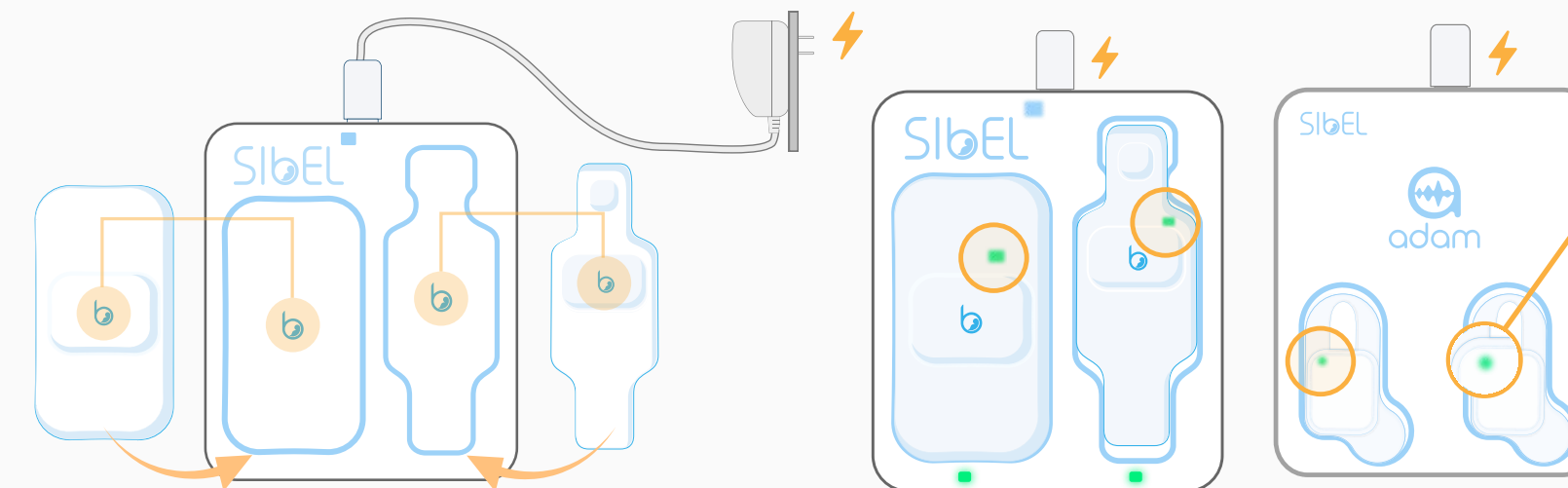


Le capteur doit afficher une DEL
verte lorsqu'il est sur le chargeur.


- DEL clignotante
Le capteur est en cours de
chargement, mais n'est pas
complètement chargé.
- DEL fixe
Le capteur est entièrement chargé.

CONFIGU- RATION DE L'iPAD

- 1 Assurez-vous que l'iPad est chargé
et connecté à Internet.

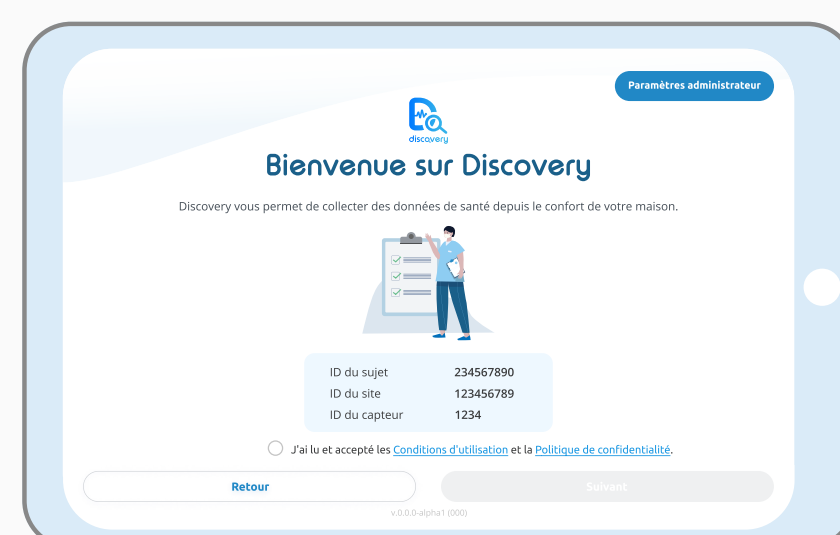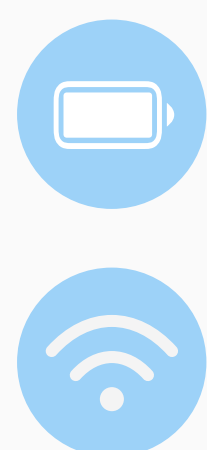

- 2 Approchez les capteurs de l'iPad pour les connecter.
(Ils doivent être situés à moins de 2 mètres l'un de l'autre)

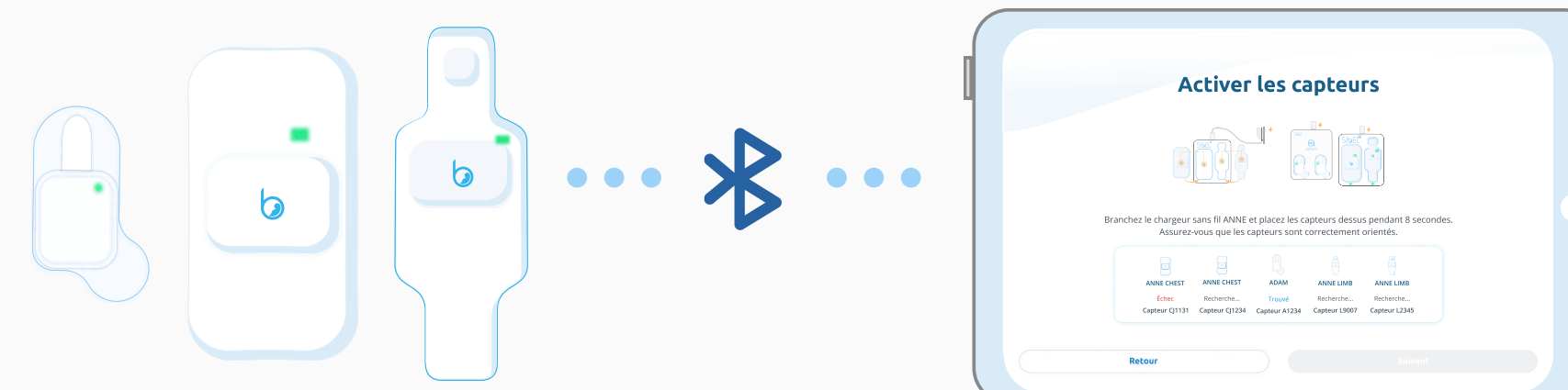




Guide de démarrage rapide de l'application

Manuel d'utilisation de l'application

! Dépannage

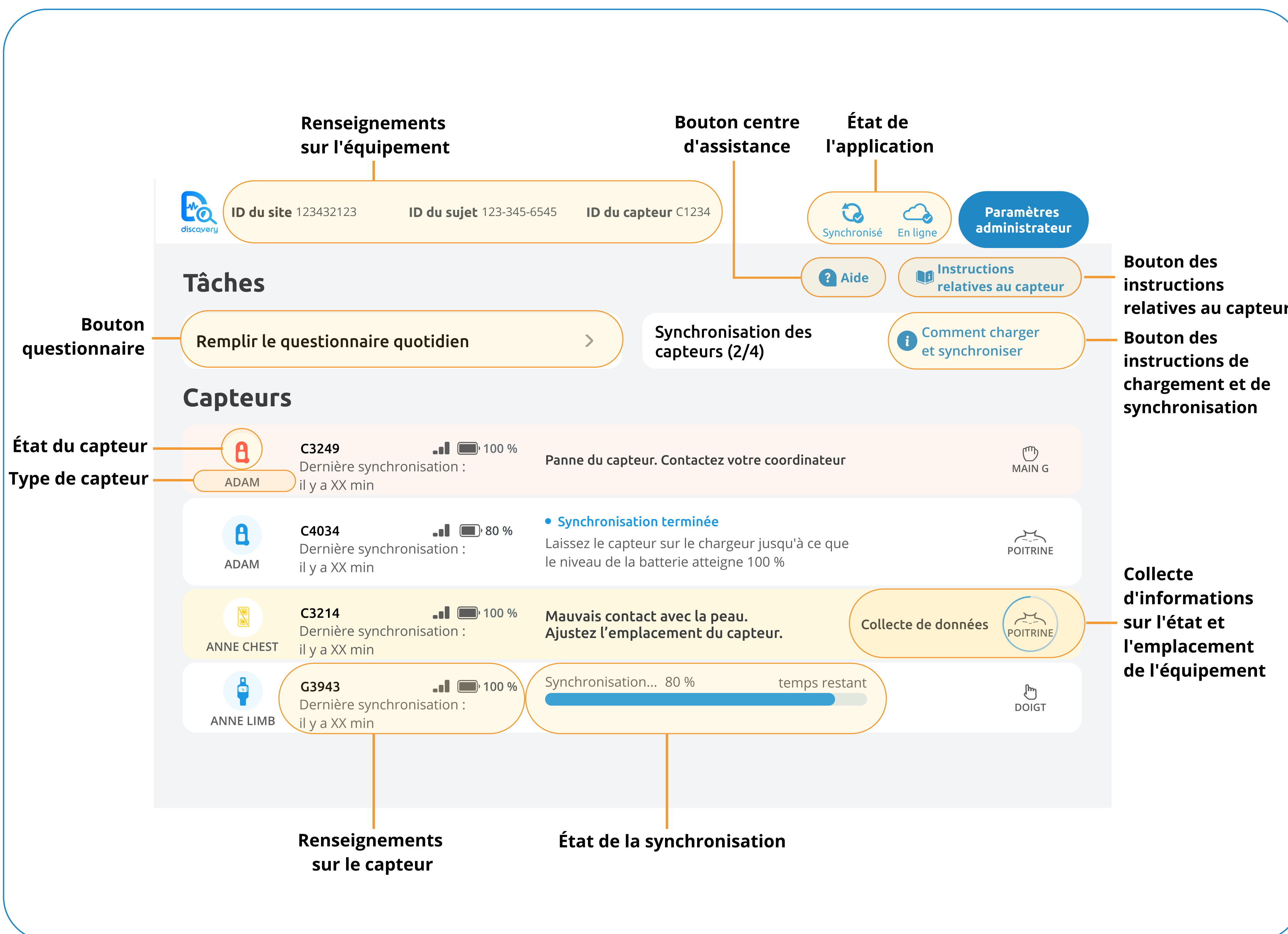

Hors ligne

Vérifiez la connexion Internet.



Non synchronisé

Vérifiez la connexion Internet.



Mauvais contact avec la peau

Ajustez l'emplacement ou remplacez l'adhésif.



Panne du capteur

Contactez le coordinateur de l'étude.



Capteur hors de portée

Rapprochez la tablette du capteur. Le capteur se reconnecte automatiquement après la détection du signal.



Batterie faible

Chargez le capteur dès que possible. Le capteur se déconnecte automatiquement lorsque la batterie est épuisée.