


Rychlý návod


Denní rutina

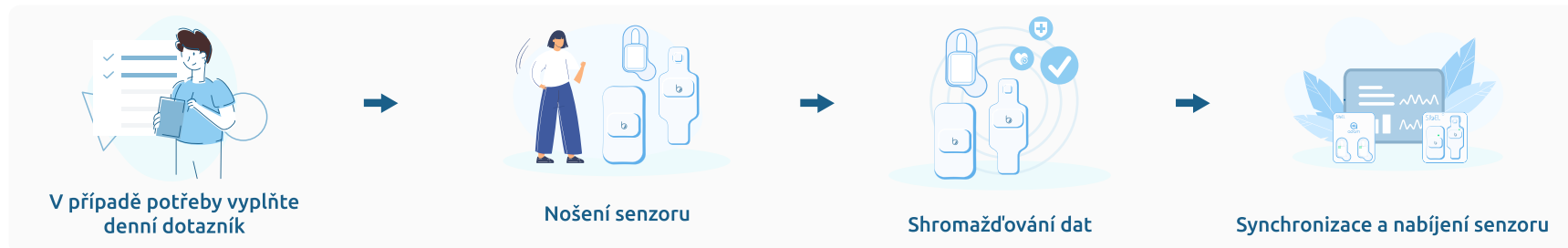


Jak nastavit senzor a iPad

NASTAVENÍ SENZORU

- 1 Vydezinfikujte senzory a ezdrátovou nabíječku.

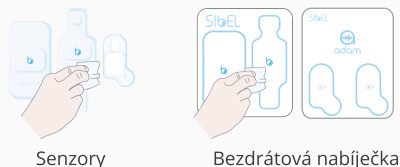

- 2 Položte senzory na nabíječku, čímž dojde k jejich probuzení.

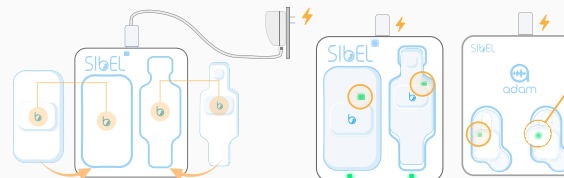

Když je senzor na nabíječce, měla by se zobrazit zelená kontrolka LED.


- Blikající kontrolka LED
Nabíjení senzoru nebo neúplné nabití senzoru.
- Kontrolka LED trvale svítí
Senzor je plně nabitý.

NASTAVENÍ IPADU

- 1 Zajistěte, aby byl iPad nabitý a připojený k internetu.



- 2 Přesuňte senzory do blízkosti iPadu, aby se senzory spárovaly. (Musí být ve vzdálenosti do 2 metrů od sebe)

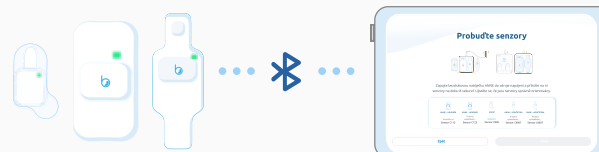

Rychlý návod k aplikaci

Příručka k aplikaci

! Řešení problémů

The screenshot shows the main interface of the application. Annotations point to the following elements:

- Informace o soupravě**: Points to the top header area containing system information.
- Tlačítko centra podpory**: Points to the 'Nápověda' (Help) button.
- Stav aplikace**: Points to the status indicators 'Synchronizováno' and 'Online'.
- Tlačítko pokynů k senzoru**: Points to the 'Pokyny K Senzoru' (Sensor Instructions) button.
- Nabíjení a synchronizace tlačítka pokynů**: Points to the 'Jak nabíjet a synchronizovat' (How to charge and sync) button.
- Tlačítko dotazníku**: Points to the 'Vyplňte denní dotazník' (Fill out daily questionnaire) button.
- Stav senzoru**: Points to the sensor status icons (red, blue, yellow, green).
- Typ senzoru**: Points to the sensor type labels (ADAM, ANNE - HRUDNÍK, ANNE - KONČETINA).
- Informace o senzoru**: Points to the sensor ID and last sync time.
- Stav synchronizace**: Points to the sync progress bar and status.
- Stav shromažďování / umístění na těle**: Points to the 'Shromažďování dat' (Data collection) button and the 'HRUDNÍK' (Chest) icon.

Informace o soupravě

Informace o soupravě 123432123 ID subjektu 123-345-6545 ID soupravy senzoru C1234

Úkoly

Vyplňte denní dotazník

Senzory

C3214WW Poslední synchronizace: před XX minutami Porucha senzoru. Kontaktujte svého koordinátora. Levá ruka

C4034 Poslední synchronizace: před XX minutami Synchronizace dokončena Nechejte senzor na nabíječce, dokud nebude baterie zcela nabitá HRUDNÍK

C3214 Poslední synchronizace: před XX minutami Špatný kontakt s pokožkou. Upravte umístění senzoru. Shromažďování dat HRUDNÍK

G3943 Poslední synchronizace: před XX minutami Probíhá synchronizace... 80% zbývající čas Prst

Offline
Zkontrolujte připojení k internetu.

Nesynchronizováno
Zkontrolujte připojení k internetu.

Špatný kontakt s pokožkou
Upravte umístění nebo vyměňte lepidlo.

Porucha senzoru
Kontaktujte koordinátora studie.

Senzor mimo rozsah
Přemístěte tablet blíže k senzoru. Senzor se automaticky znovu připojí, jakmile detekuje signál.

Téměř vybitá baterie
Nabíjte senzor co nejdříve. Senzor se při vybité baterii automaticky odpojí.