




Guida all'avvio rapido del sensore


Posizionamento del sensore sul torace

1

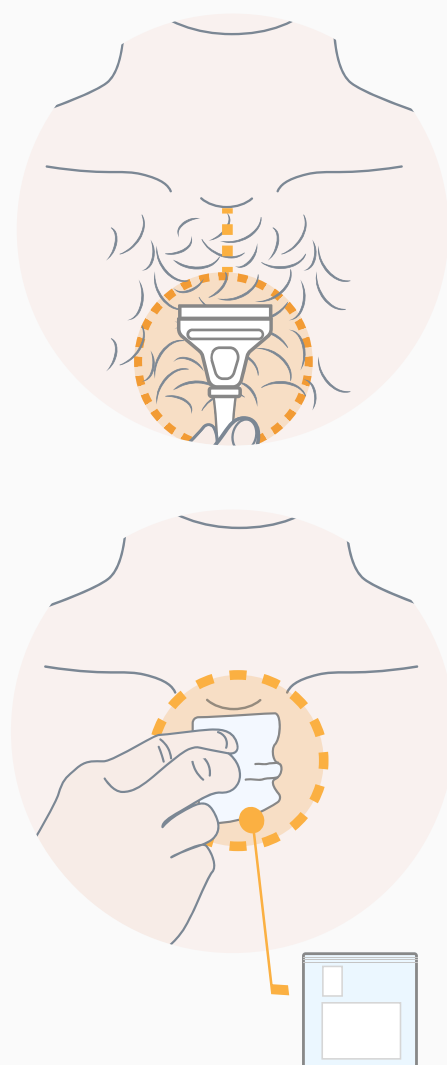


- Rasare la zona di applicazione sul torace.
- Preparare l'area subito sotto la clavicola.

2

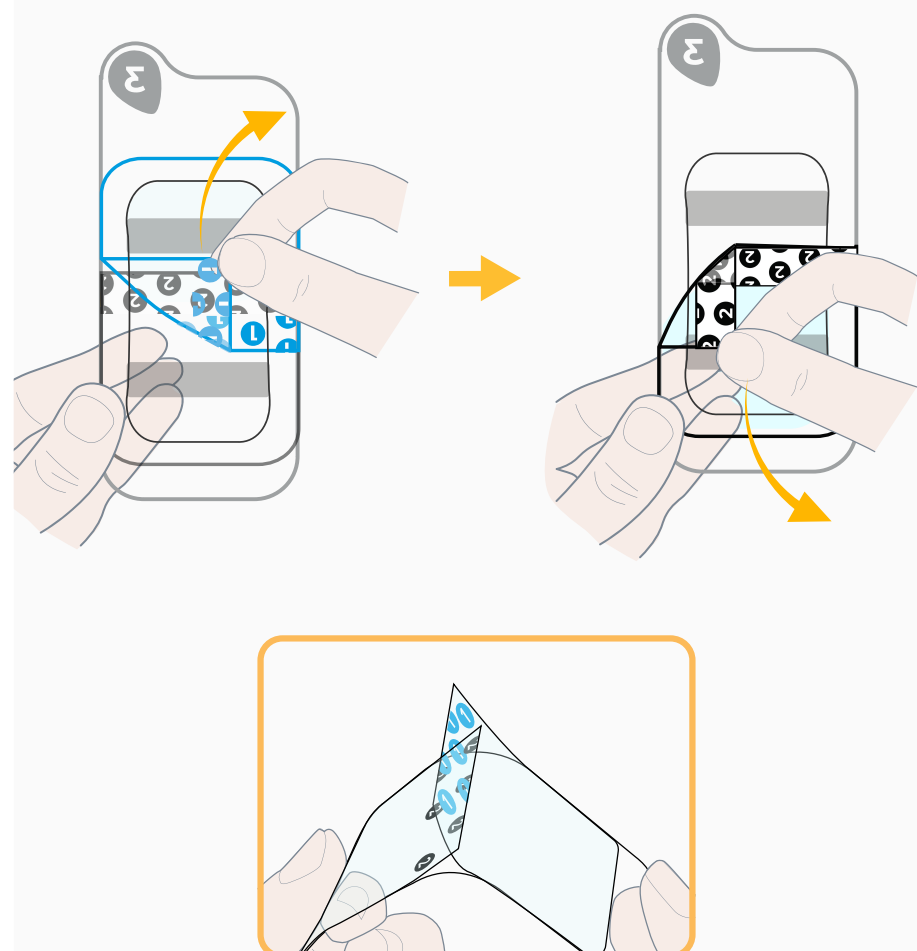


- Staccare la **1** pellicola.
- Quindi staccare con cura la **2** pellicola.

3

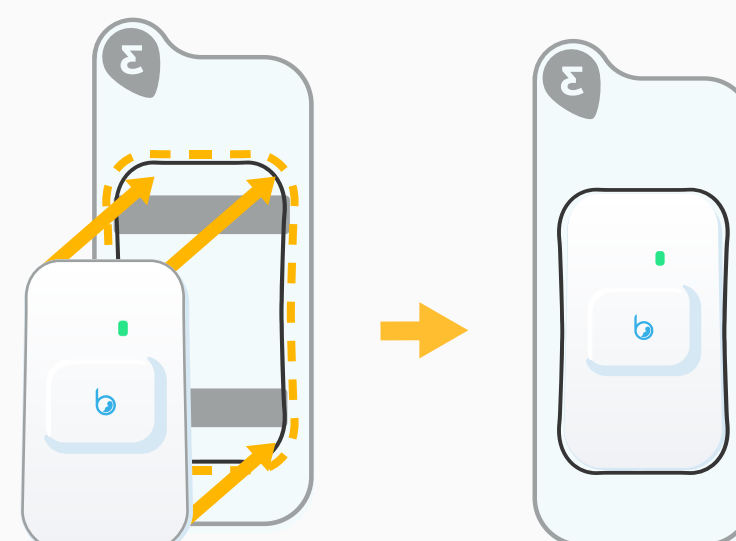


- Il sensore ANNE Chest deve essere applicato con il logo rivolto verso di sé.
- Posizionare il sensore sull'adesivo e premere per far aderire bene.

4

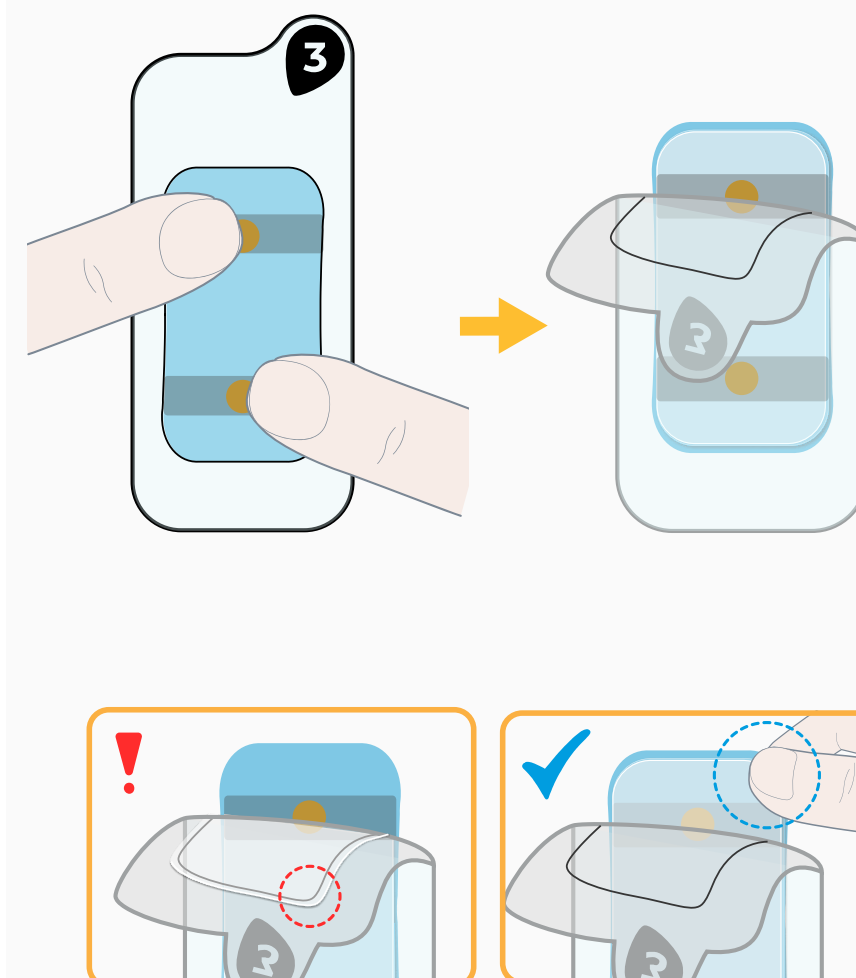


- Girare il sensore sull'altro lato.
- Staccare la **3** pellicola.

5

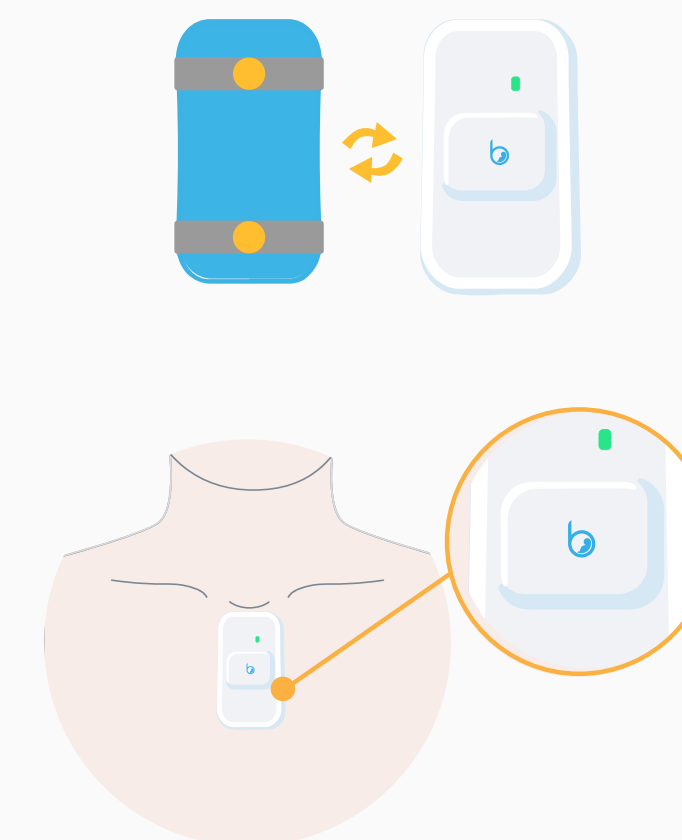

- Tenere il sensore con il logo rivolto verso l'esterno e la lettera "b" del logo orientata verso l'alto.
- Individuare la zona al centro del torace e al di sotto delle clavicole.
- Applicare il sensore e premere per assicurarsi la perfetta adesione.

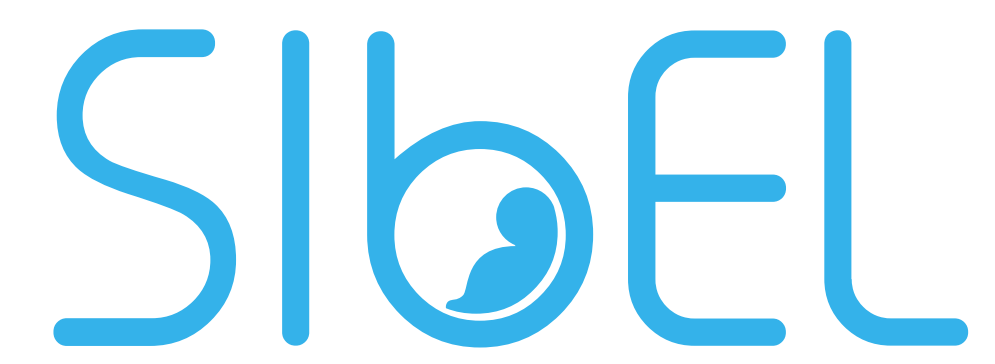

Better Health Data for All