




Guía de inicio rápido del sensor


Colocación del sensor torácico

1

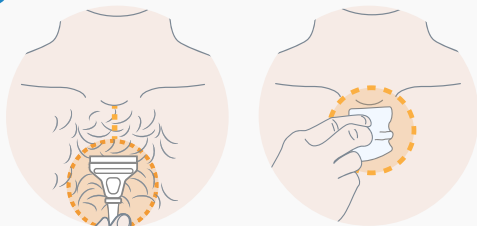


- Prepare la zona del pecho afeitándose el vello corporal.
- Limpie la zona justo debajo de las clavículas.

2

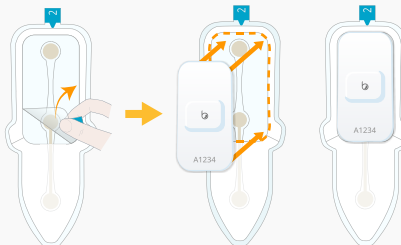


- Retire la capa protectora transparente **1**.
- Oriente el sensor con el logotipo hacia usted. Coloque el sensor sobre el adhesivo y presione para garantizar la adhesión.

3

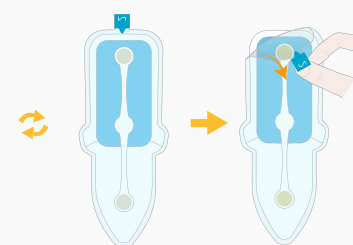


- Gire el sensor hacia el otro lado.
- Retire la capa protectora transparente **2**.

4

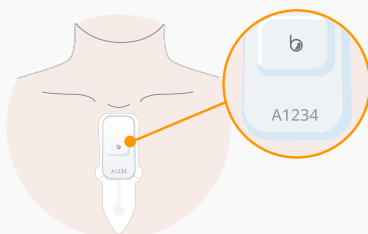


- Coloque el sensor torácico debajo de la horquilla esternal con el logotipo y el identificador del sensor hacia arriba.

5

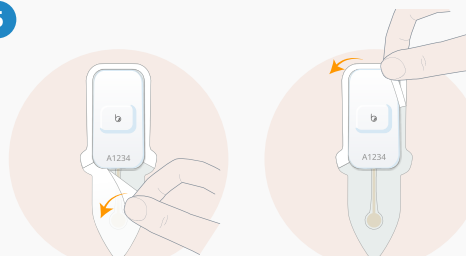

- Retire lentamente los protectores blancos del adhesivo.

6

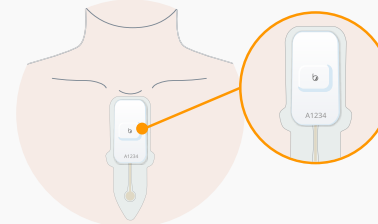

- Asegúrese de que el logotipo y el identificador del sensor estén correctamente orientados.



Better Health Data for All