




# Guide de démarrage rapide du capteur


## Placement du capteur thoracique

1

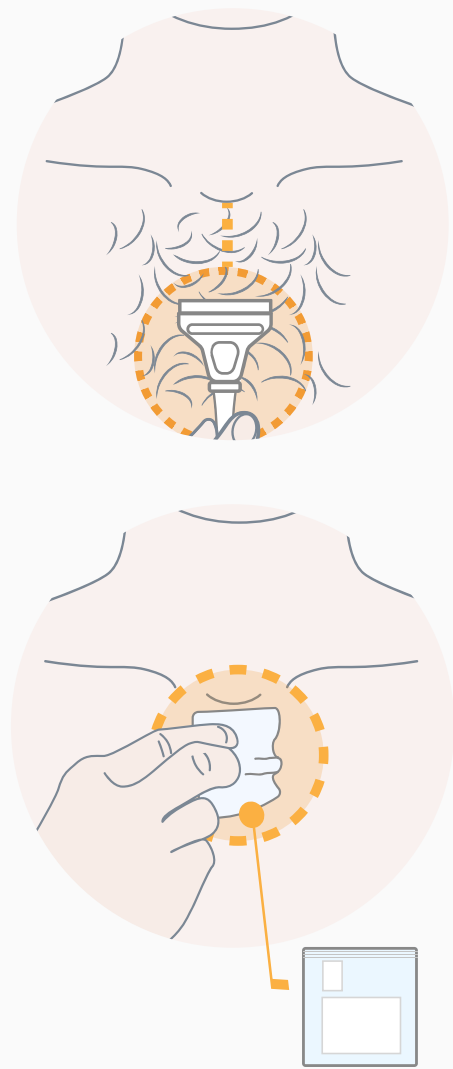


- Préparez votre poitrine en rasant les poils.
- Nettoyez la zone juste sous vos clavicules.

2

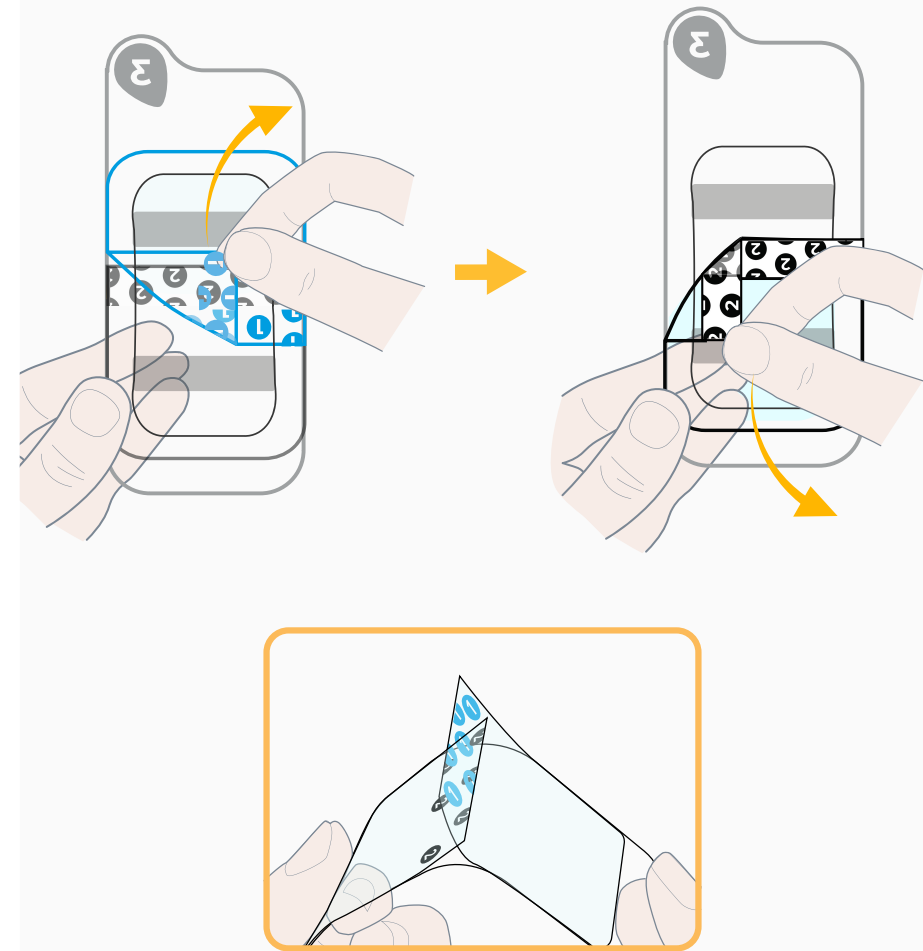


- Décollez le revêtement 1.
- Ensuite, décollez soigneusement le revêtement 2.

3

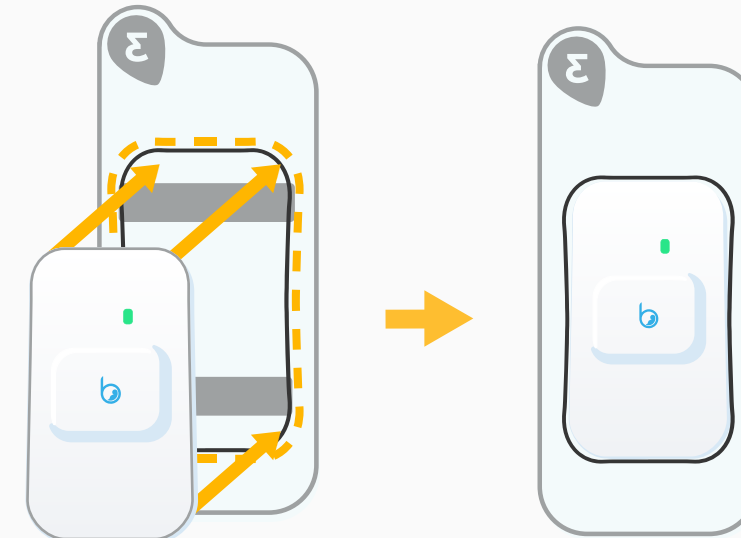


- Assurez-vous que le logo de votre capteur ANNE Chest est tourné vers vous.
- Placez le capteur sur l'adhésif et appuyez pour garantir l'adhérence.

4

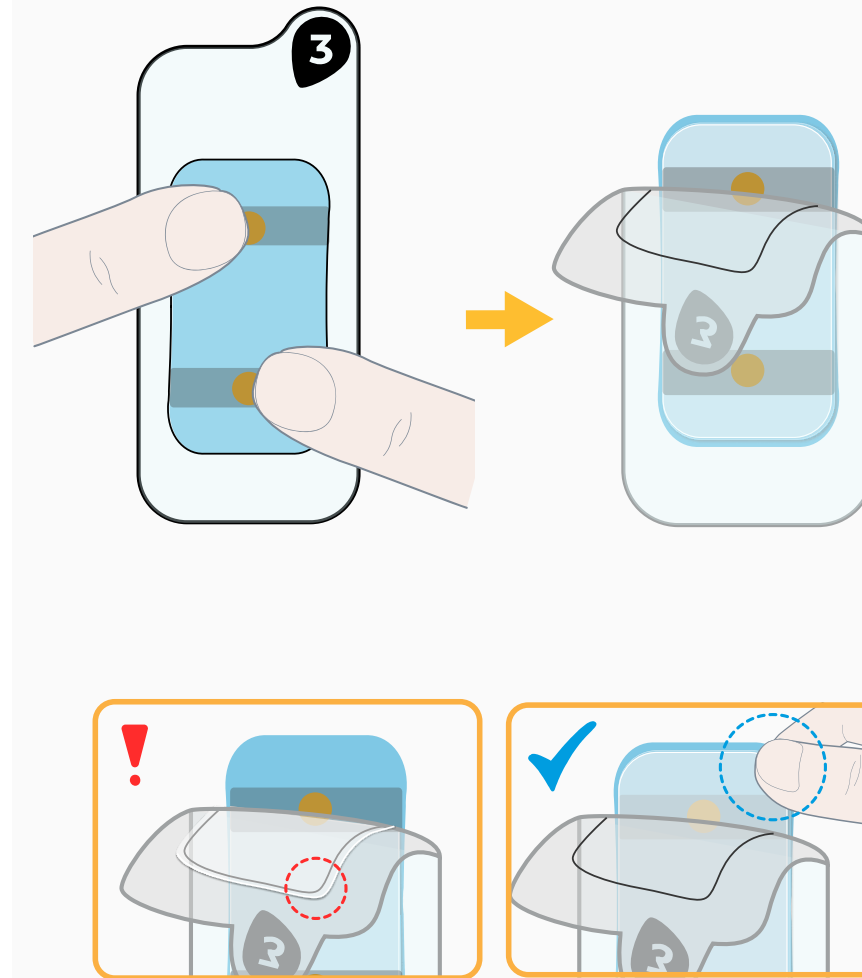


- Retournez le capteur de l'autre côté.
- Décollez le revêtement 3.

5

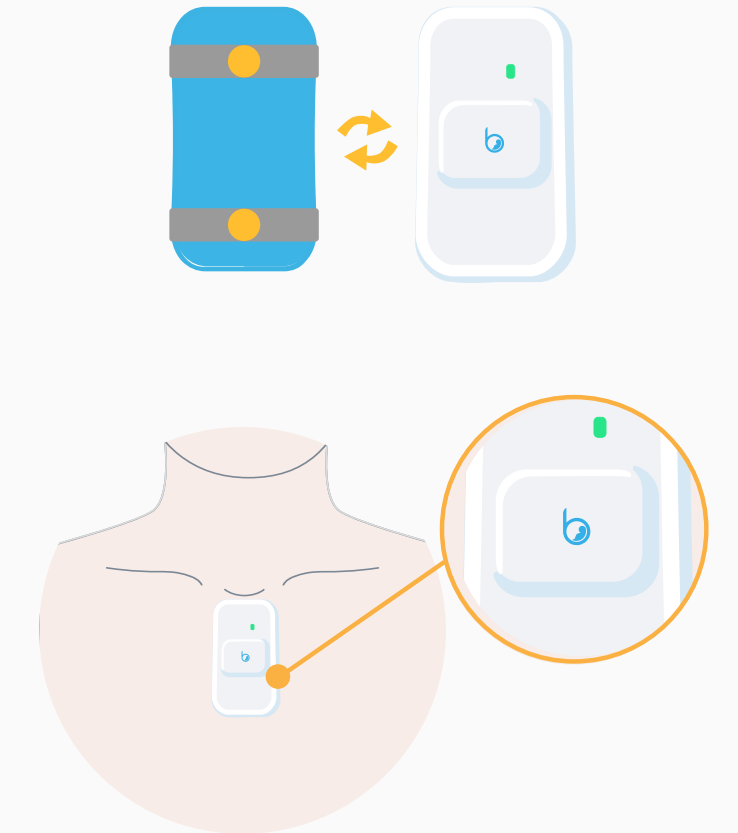

- Tenez le capteur avec le logo tourné vers vous et la lettre « b » du logo orientée vers le haut.
- Déterminez la zone au milieu de votre poitrine, sous les clavicules.
- Posez le capteur et appuyez pour vous assurer qu'il est bien collé.

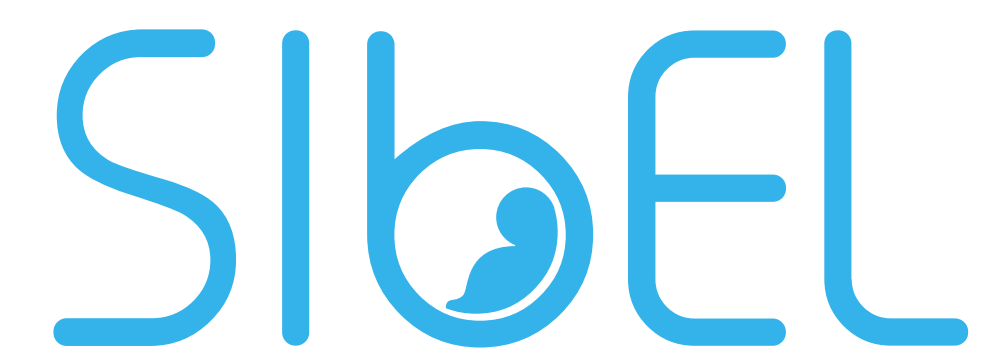

Better Health Data for All